

waterpik®

Moč vode.

Zobna prha
Waterpik WP100



Standardni nastavek s pulzirajočim curkom masira naše dlesni in jih krepi. Tudi kapilare so odpornejše.



Nastavek za čiščenje jezika odstrani bakterije, ki so eden izmed vzrokov za slab zadah.



Pik Pocket® nastavek za čiščenje žepkov dlesni ter kontrolo vnetij in krvavitve okrog implantatov.



Posebni nastavek za čiščenje fiksnih aparatov zmanjša krvavitve in vnetja ter prispeva k zdravju zob.


Pri izboru prhe pazite na dva pogoja za njeno učinkovitost. Prvi je pulzirajoč curek, kjer voda brizga iz prhe po kapljicah. Najučinkovitejša frekvenca je med 1200 in 1400 kapljic na minuto. Takrat čas med dvema pulzoma zadostuje za prožno gibanje dlesni in pospešen krvni obtok. Frekvenca je bistvena tudi za učinkovito odstranjevanje zobnih oblog iz medzobnega prostora. Drugi pogoj je tlak vode v območju med 3,8 in 6,2 bar. Nižji tlak nima zadostnega učinka odstranjevanja zobnih oblog, premočan pa lahko poškoduje dlesni.

Varnost in učinkovitost Waterpik® zobnih prh potrjuje več kot 45 kliničnih študij neodvisnih organizacij. So tudi edine prhe s klinično testirano uporabo pri diabetikih.

Uporaba zobne prhe Waterpik

Waterpik zobna prha omogoča nastavitve tlaka curka, kar omogoči lažje privajanje na prhanje zob tistim, ki se s tovrstno nego srečujejo prvič. Pred prvo uporabo nastavite regulator tlaka na najnižjo stopnjo. Nato postopoma povečujte tlak vodnega curka do zelene stopnje.

Prhanje pričnite s standardnim nastavkom. Vodni curek usmerite na rob dlesni pod kotom 90°. Usta rahlo zaprite, da preprečite škropljenje naokrog. Le toliko, da bo voda nemoteno odtekala iz ust v umivalnik.

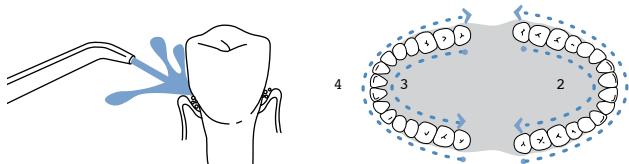


Priporočamo, da pričnete s čiščenjem kočnikov in se počasi pomikate proti sprednji strani. Z brizgalnim nastavkom počasi drsite po robu dlesni in se med zobmi za kratek čas ustavite. Nadaljujte dokler ne očistite vse predele okoli zob in med njimi.

Posebni napotki

S pomočjo Pik Pocket® nastavka lahko voda ali antibakterijska raztopina prodre globoko pod rob dlesni in očisti paradontalne žepke. Mehko konico nastavka prslonimo k zobu pod kotom 45° in previdno potisnemo konico pod rob dlesni v žepok. Regulator tlaka nastavimo na najnižjo stopnjo. Z nastavkom se nato sistematično pomikamo po robu dlesni do naslednjega žepka.



Z uporabo nastavka za čiščenje jezika odstranimo bakterije z jezika, ki so prav tako eden izmed krivcev za zadah.

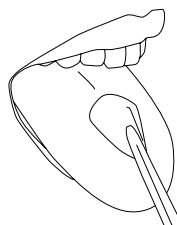

Prhi Waterpik je dodan ortodontski nastavek za spiranje in krtačenje težko dostopnih mest okrog ortodontskega aparata. Z vodo, ki priteka skozi nastavek boste odstranili ostanke hrane.

Učinkovitost zobnih prh Waterpik dokazuje preko 45 kliničnih študij. Večina študij je bila izvedenih z uporabo vode. S prho se lahko uporabljajo antibakterijska sredstva, vendar je treba po njihovi uporabi izvesti temeljito čiščenje prhe v skladu z navodili.



OMRON

waterpik

diafit®

Ohranimo zdrave zobe in dlesni.

Sonična ščetka OMRON in zobna prha WATERPIK

Zastopa in prodaja: Diafit d.o.o., Spodnji Slemen 6, 2352 Selnica ob Dravi
T: 02/674 08 51, 02/674 08 52, F: 02/674 08 89, E: info@diafit.si, www.diafit.si