




DIGITALNI TERMOMETER

Zahvaljujemo se Vam za nakup Medikoel-ovega Digitalnega Termometra Me510.
Pred uporabo natančno preberite navodila in jih skrbno shranite za nadaljnjo uporabo.

LASTNOSTI

1. Digitalni LCD zaslon omogoča enostaven odčitek izmerjene temperature.
2. Kompakten, točen in trpežen.
3. Omogoča različne načine merjenja; pod pazduho (aksilarno) ali pod jezikom (oralno). Način merjenja temperature v danki (analno) pri dojenčkih uporabite le, ko drugi načini merjenja niso mogoči.
4. Hitro in natančno merjenje.
5. Po 10 minutah se avtomatično izklopi.
6. Majhen, lahek (11g) in primeren za vso družino.
7. V primerjavi s klasičnim termometrom je varen in ne predstavlja tveganja, da bi prišlo do poškodb ali zastrupitev z živim srebrom.

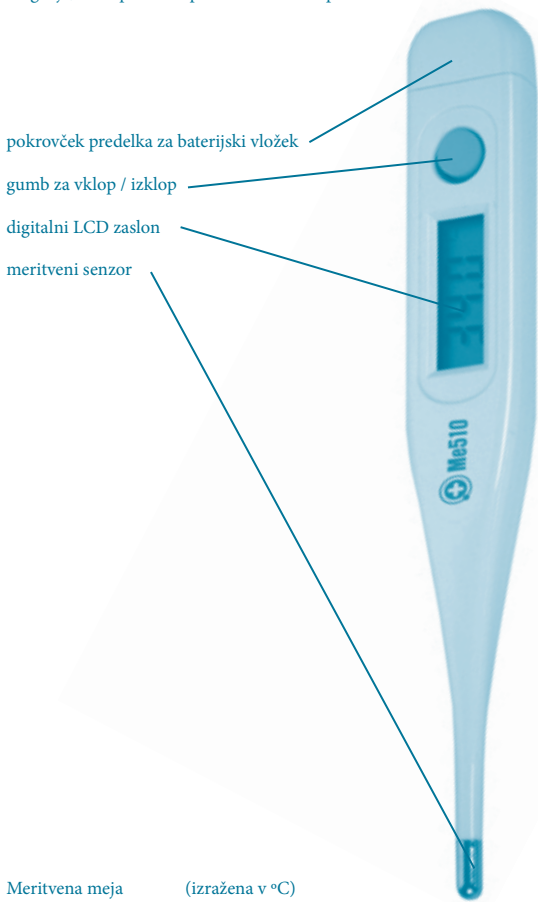

Meritvena meja	(izražena v °C) 32,0 °C - 43,9 °C
Meritvena natančnost	(izražena v °C) ±0,3 °C pri temp. do 35,8 °C ±0,2 °C pri temp. od 35,8 °C do 37,0 °C ±0,1 °C pri temp. od 37,0 °C do 39,0 °C ±0,2 °C pri temp. od 39,0 °C do 41,0 °C ±0,3 °C pri temp. nad 41,0 °C

Zaslon	• tekoči kristalni zaslon (LCD) s tri in pol znaki
Baterijski vložek	• mikro alkalni 1,55V (192 ali LR41)
Poraba	• 0,15 mV med merjenjem
Življenjska doba baterijskih vložkov	• preko 200 ur neprekinjenega merjenja
Teža	• 11 g (skupaj z baterijskim vložkom)
Dimenzije	• 9mm x 18mm x 123mm
Zvočni signal	• 10 sekund trajajoči zvočni signal opozori na uspešno meritev

VARNOSTNA OPOZORILA

1. Ščitite termometer pred udarci!
2. Ne potaplajte termometra v tekočino, saj je vodoodporna samo konica termometra. Ne prekuhavajte ga.
3. Za čiščenje in sterilizacijo termometra pred in po uporabi uporabite etilni alkohol.
4. Izogibajte se kontaktu med termometrom in različnimi kemijskimi raztopinami.
5. Ne puščajte termometra direktno na sončni svetlobi ali v prostoru z visoko temperaturo.
6. Prostor za baterijski vložek odpirajte le, ko se baterijski vložek popolnoma iztroši.

MENJAVA BATERIJSKIH VLOŽKOV

Na iztrošen baterijski vložek vas bo opozoril simbol "☐". Baterijski vložek je potrebno zamenjati.

1. Odstranite pokrovček predelka za baterijske vložke.
2. Pri odstranitvi baterijskega vložka uporabite zobotrebec in ne ostrih kovinskih predmetov.
3. Vstavite nov baterijski vložek tako, da pozitivna polariteta gleda navzgor, negativna pa navzdol.
4. Pokrovček predelka za baterijske vložke vstavite nazaj na mesto.

Opozorila:

Baterijske vložke ne vstavljajte v usta, saj takšno dejanje lahko pusti resne ali usodne posledice. V primeru zaužitja baterijskih vložkov nemudoma poiščite medicinsko pomoč!
Iztrošenega baterijskega vložka ni več možno polniti.
Ne puščajte jih v bližini vira toplote!

MERJENJE TELESNE TEMPERATURE

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop. Na zaslonu se pokaže znak "188,8 °C".
2. Spustite gumb. Na zaslonu se pokaže znak "L °C", kjer °C utripa. Termometer je tako pripravljen na merjenje temperature.
3. Razkružite konico termometra z razredčenim alkoholom in vstavite termometer na prostor merjenja (pod pazduho, v usta, v danko).
4. Po 40-120 sekundah znak "°C" preneha utripati in na zaslonu lahko odčitate pravilno temperaturo. Vrednost temperature se ne bo spremenila, ko bo znak "°C" prenehal utripati. Zvočni signal, ki se pojavi, traja 10 sekund in vas opozori, da je meritev končana.
5. Roko držite mirno, nežno stisnjeno ob telo tako, da je celotna konica termometra pokrita.
Termometer lahko vstavite tudi v ustno votlino, pod jezik in pazite, da med merjenjem ne odpirate ust.
6. Previdno odstranite termometer z merilnega mesta in pazite, da ne pritisnete gumba za vklop/izklop, saj bo rezultat izginil.
7. Termometer se po 10 minutah avtomatično izklopi. Če pa želite, da baterijski vložki trajajo dlje časa, s pritiskom na gumb vklop/izklop sami izklopite termometer.

NAČIN MERJENJA

Temperatura je vedno izražena v Celzijevih stopinjah (°C).

ORALNO MERJENJE (V USTIH)

Udobno namestite merilno konico termometra pod jezik in imejte usta v času merjenja vedno zaprta.
Normalna temperatura za tovrsten način merjenja je 37 °C.

AKSILARNO MERJENJE (PODPAZDUŠNO)

Osušite pod pazdušni del roke in vstavite termometer v pod pazdušno votlino tako, da roka nežno pritiska na gornji del telesa. Normalna temperatura za tovrsten način merjenja je 36,7 °C.

REKTALNO MERJENJE (V DANKI)

Za lažje merjenje temperature v danki uporabite gel, ki ga nanese na konico termometra. Nežno vstavite termometer približno centimeter v zadnjično odprtino.
Normalna telesna temperatura za tovrsten način merjenja je 37,6 °C.

ČIŠČENJE

Če uporabljate termometer za domačo uporabo, vam svetujemo, da ga čistite z raztopino alkohola v vodi. Nato ga obrišite z vlažno krpo in skrbno osušite.

OPOMBA: Potopite lahko le del termometra pod digitalnim zaslonom.

DVOLETNA GARANCIJA

Družba Medikoel d.o.o. jamči, da bo naprava v roku dveh let od datuma nakupa, pod priporočenimi pogoji delovanja, delovala brezhibno. Za zanesljivo delovanje termometra več let upoštevajte navodila. Če termometer ne deluje, najprej preverite baterijski vložek in ga zamenjajte, če je to potrebno.