



Medikoel Me520

Digitalni termometer z gibljivo merilno konico

Zahvaljujemo se Vam za nakup Medikoel Digitalnega Termometra z gibljivo merilno konico Me 520. Pred uporabo Vas prosimo, da natančno preberite navodila in jih skrbno shranite za nadaljnjo uporabo.

TEHNIČNI PODATKI

	Z vodoodporno in upogljivo merilno konico za priločno uporabo
Območje merjenja:	32.0°C – 42.9°C (90.0°F – 109.9°F) (Vrsta skale je izbrana s strani proizvajalca)
Natančnost:	±0.1°C 35.5°C – 42.0°C (±0.2°F 95.9°F – 107.6°F) ±0.2°C pod 35.5°C ali nad 42.0°C (±0.4°F pod 95.9°F ali nad 107.6°F) pri standardni sobni temperaturi 25°C (77.0°F)
Prikazovalnik:	Tekoči kristalni zaslon, 3/4 znakov
Baterijski vložek:	1.5 V DC, gumbni baterijski vložek (SR41, UCC 392 ali LR41)
Poraba energije:	0.15 mW med merjenjem
Življenjska doba bat. vložka:	preko 200 ur neprekinjenega merjenja
Dimenzije:	12.4cm x 2.5cm x 1.2cm (L x W x H)
Teža:	Približno 13 g skupaj z baterijskim vložkom
Zvočni signal:	Približno 10 sekund trajajoč zvočni signal ob dosegu najvišje temperature
Pogoji delovanja:	Temperatura: 10.0°C – 35.0°C (50.0°F – 95.0°F) Vlažnost: 25%RV – 80%RV
Pogoji shranjevanja:	Temperatura: -25°C - 55°C (-13°F - 131°F) Vlažnost: 25%RV – 80%RV
Vodoodporen:	Ustreznost z EN12470-3:2000

NAČIN UPORABE

1. Pritisnite gumb Vklop/Izklop in ga držite 2 sekundi. Na prikazovalniku se pokaže znak "188,8 °E" in zasliši se zvočni pisk.
2. Spustite gumb Vklop/Izklop in za 2 sekundi se bo prikazala zadnja izmerjena vrednost. Sledi prikaz testirane temperaturne vrednosti 37.0°C (98.6°F), ki traja 1 sekundo. Ko se prikaže znak Lo°C (Lo°F) je termometer pripravljen na merjenje.
3. Konico termometra dezinficirajte tako, da ga obrišete ali pomočite v alkohol. Vstavite termometriko konico oralno, rektalno ali aksilarno.
4. Po 30-60 sekundah znak °C (°F) preneha utripati. Pojavi se 10 sekund trajajoč zvočni signal, ki vas opozori na končano meritev. Odstranite termometer z merilnega mesta. Če je izmerjena vrednost pod 37.8°C (100.0°F) boste zaslišali štiri zvočne signale "Bi-B-i-Bi-"; če pa je izmerjena vrednost nad 37.8°C (100.0°F), si zvočni signali "Bi-Bi-Bi-----Bi-Bi-Bi-" v 10 sekundah sledijo pogosteje.
5. Termometer varčuje z energijo in se po 10 minutah avtomatično izklopi. Če pa želite, da baterijski vložek traja dlje časa, s pritiskom na gumb Vklop/Izklop po koncu merjenja sami izklopite termometer.
6. Z iztrošenimi baterijskimi vložki in dotrajanim aparatom postopajte v skladu z zakonom.




Opomba: Če je sobna temperatura višja od 32°C (90°F), bo termometer v točki 2 prikazal sobno temperaturo.

Opomba: Izmerjena vrednost temperature odstopa od prave vrednosti temperature za 0.1°C (0.2°F).

ORALNO MERJENJE (V USTNI VOTLINI)

Vstavite merilno mesto termometra pod jezik tako, kot prikazuje znaka "√" na sliki. Natančnost merjenja si zagotovite tako, da imate 5 minut pred merjenjem usta zaprta. Normalna temperatura, dobljena na tovrsten način merjenja, je 37.0°C (98.6°F).

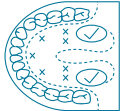

REKTALNO MERJENJE (V DANKI)

Vstavite merilno mesto termometra v danko uporabite gel, ki ga nanese na konico termometra. Nežno vstavite termometer približno centimeter v zadnjično odprtino in merite približno 1 minuto. Normalna temperatura, dobljena na tovrsten način je 37.6°C (99°F).

AKSILARNO MERJENJE (PODPAZDUŠNO)

Obrišite pazdušno votlino z suho brisačo. Vstavite konico termometra pod pazduho in nežno stisnite roko tako, da se merilno mesto med merjenjem čvrsto dotika kože. Normalna temperatura, dobljena po tovrsten način je 36.5°C (97.7°F).

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA

1. Termometer očistite tako, da ga obrišete z suho tkanino in merilno konico sterilizirate z etilnim alkoholom.
2. Ne dovolite, da termometer pride v kontakt z kakršnokoli kemično raztopino.
3. Konica termometra je vodoodporna, torej jo lahko potopite v vodo, ali če jo želite dezinficirati, v alkohol.


VARNOSTNA OPOZORILA



- Ščitite termometer pred udarci. Pred njimi ni zaščiten.
- Ne vohajte merilne konice.
- Ne prekuhavajte merilne konice.
- Ne puščajte termometra direktno na sončni svetlobi ali na visoki temperaturi!
- Ne poskušajte razstavljati enot termometra, razen pri menjavi baterijskih vložkov.
- Če termometer uporabljajo otroci, je nadzor s strani odraslih oseb obvezna.
- Pomeni direktni volti d.c.
- pomeni tip B.

MENJAVA BATERIJSKIH VLOŽKOV

1. Na iztrošen baterijski vložek vas opozori znak " ", ki se vam izpiše na prikazovalniku. Baterijski vložek je potrebno zamenjati.
2. Odstranite pokrov predelka za baterijski vložek tako, kot kaže slika.
3. Zaponko baterijskega vložka vrtite v smeri urinega kazalca toliko časa, dokler ni baterijski vložek popolnoma dostopen.

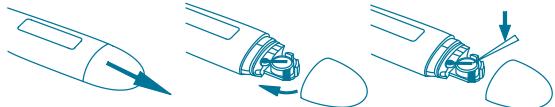

4. Uporabite koničast predmet, kot na primer pisalo, s katerim boste iztrošen baterijski vložek odstranili. Ne puščajte ga v bližini otrok.
5. Vstavite nov 1.5V d.c. gumbni baterijski vložek, tipa SR41, UCC 392 ali LR41 (ali ekvivalentnega) tako, da je pozitivna polariteta obrnjena navzgor, negativna pa navzdol.
6. Zavrtite zaponko baterijskega vložka v nasprotni smeri urinega kazalca in namestite pokrov predelka za baterijski vložek spet nazaj na prvotno mesto.

