

PHILIPS

AVENT

Ščitnik za bradavico

Oblikovan za stik s kožo

Ščiti razdražene bradavice

Majhen (15 mm)

2 kosa



SCF153/11



Pomaga pri daljšem in udobnejšem dojenju*

Enostaven oprijem za otroka in nežnost do vaše kože*

Ščitniki za bradavice so zasnovane tako, da vam omogočajo dojenje v primeru težav z bradavicami ali pri težavah z oprijemom. Izjemno tanek ščitnik za bradavice v obliki metuljčka vašemu otroku omogoča stik s prsmi in s tem nadaljnje vzpostavljanje povezanosti med dojenjem.

Značilnosti izdelka

- Oblikovani, da dojenčku omogočajo stik s kožo
- Zasnovani za popolno prileganje

Enostaven oprijem za vašega dojenčka*

- Pomoč pri oteženem oprijemu

Kdaj uporabiti ščitnik za bradavice


- Za občutljive, razdražene ali boleče bradavice
- Dojenčki lahko pijejo z lastno hitrostjo
- Kombinacija dojenja in hranjenja s stekleničko

Higienska škatlica

- Enostavno čiščenje v higieni škatlici za prenašanje


Značilnosti

Edinstvena oblika metulja

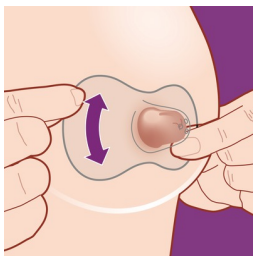


Naši izjemno tanki ščitniki za bradavičke v obliki metulja so zasnovani za nemoten stik s kožo. Zaradi oblike ni v stiku s prsmi samo otrokov nos, ampak tudi brada, kar otroku omogoča neprekinjeno izpostavljenost materinemu vonju in stik z materino kožo. Ščitnik preprosto postavite sredinsko nad bradavico, da jo bo lahko otrok objel po celotnem obodu. Uživate v povezanosti s svojim malčkom in hkrati zaščitite svoje bradavice.

Pomoč za lažji oprijem*

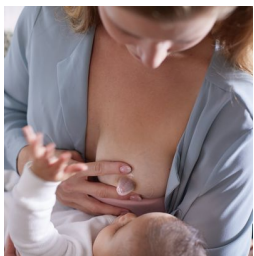

Ščitnike za bradavice smo zasnovali tako, da otrokom omogočajo lažji oprijem in vam pomagajo dojiti dlje*. Materam s ploskimi in vdrtimi bradavicami in otrokom z neustrezno tehniko sesanja ali ustnimi deformacijami lahko ščitniki za bradavice nudijo pomoč pri lažjem oprijemu in bradavičke ohranjajo v nabrekli stanju med premori pri sesanju.

Ščiti bradavice med hranjenjem

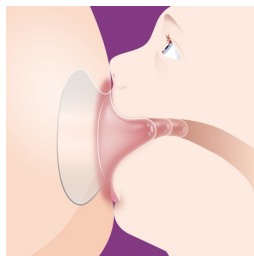

Ščitniki za bradavice so zasnovani tako, da udobje in nežno hranjenje v primeru razdraženih, napokanih ali bolečih bradavic. Pomagajo lahko tudi zmanjševati drgnjenje in natezanje bradavičk med dojenjem, kar pomeni, da lahko otroku v udobju nudite le najboljše mleko.

Hitrost hranjenja po otrokovo




Če je treba nadzorovati mamin pretok mleka ali otrok nima dovolj sesalne moči, so lahko ščitniki za bradavice v veliko pomoč. Tri luknjice na vrhu tip ščitnika lahko pomagajo pri nadzoru pretoka mleka do otroka, če ima mama preveč mleka. Tako lahko v primeru navala mleka otrok pije s svojo hitrostjo.

Kombinacija dojenja in hranjenja s stekleničko

Izjemno tanek, mehak silikonski material ščitnika za bradavico Philips Avent je bolj podoben materialom, uporabljenim v naših izdelkih za hranjenje dojenčkov, kar omogoča enostavno prehajanje, ko kombinirate dojenje in hranjenje s stekleničko.

Dve velikosti za vaše potrebe

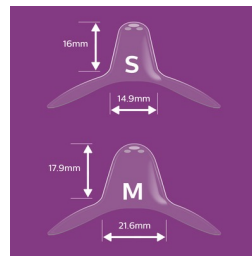

Ščitniki za bradavice so na voljo v dveh velikostih, da se bolje prilegajo prsim. Majhni ščitniki se prilegajo bradavicam s premeri od 12 mm do 21 mm. Za ugotavljanje primerne velikosti se premaknite v udoben položaj in enega od luknjičastih stožčastih delov postavite na bradavico. Ščitnik počasi obračajte v smeri vrtenja urinih kazalcev in tako uvedite bradavičko v kanal. Ploščati del ščitnika nato povlecite okrog areole. Če je med bradavico in silikonskim delom 2 mm prostora, je velikost pravilna. Namig: velikosti so določene po prsnih bradavicah, ne samo po areolah. Niste prepričani? Posvetujte se z zdravstvenim strokovnjakom.

Vedno enostavno čiščenje



Ščitnika za bradavice je treba pred vsako uporabo očistiti, kar vam bo vzelo manj kot 10 minut. Za pet minut ju položite v vrelo vodo ali pa uporabite higiensko škatlico. Dobro splaknjena ščitnika za bradavice položite v škatlico in dodajte 25 ml vode. Nato ščitnika za bradavice za tri minute postavite v mikrovalovno pečico na 750–1000 W. Počakajte pet minut, da se ohladita. Odlijte vodo, in že sta pripravljena za uporabo. Higienska škatlica za prenašanje je priročna za uporabo na poti, kot tudi za higiensko shranjevanje ščitnikov za bradavice.

Specifikacije

Kaj vsebuje

Ščitniki za bradavice 15 mm: 2 kosa

Higienska škatlica za prenašanje: 1 kosa

Zasnova

Zasnova v obliki metulja

Material

Ščitnik za bradavico: Brez bisfenola A*,
silikonski

